


ECHELON FLEX PVS

Инструменты для эндоскопических
хирургических операций

Электрический эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат с клювовидной
браншей, с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава
с одновременным рассечением ткани между двойными рядами

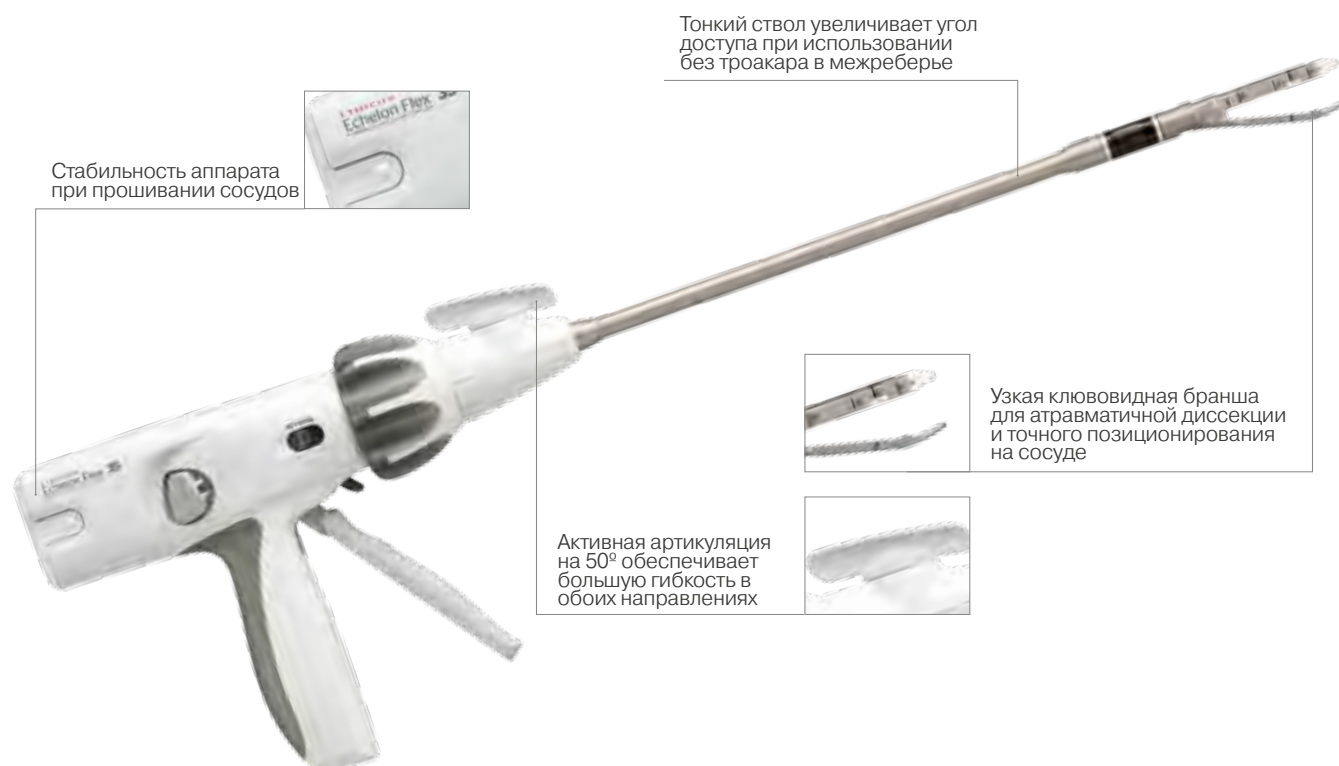

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина рабочей части: 35 мм
- Длина ствола: 320 мм
- Артикуляция: 50° в обе стороны, 5 фиксированных положений
- Ротация ствола: 360°
- Количество рядов скобочного шва: 4
- Высота закрытия скобок: фиксированная — 1,0 мм
- Общее количество прошиваний: 12
- Автоматическая система прошивания
- Поставляется незаряженным
- Предназначен для использования у одного пациента

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ШОВ:

- Благодаря трехступенчатому механизму контроля зазора между браншами, цельной литой верхней бранше, выполненной из стали 400-й серии, аппарат гарантирует качественное формирование скобок одинаковой высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают открытие уже сформированных скобок
- Линия механического шва выступает за линию разреза минимум на 1,5 скобки, обеспечивая герметичность скобочного шва
- С-образное литое лезвие из стали 400-й серии обеспечивает качественное рассечение тканей от первого до двенадцатого прошивания

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:




- 7 мм ширина бранши в сочетании с клювовидной формой создана для атравматичной диссекции и маневрирования вокруг сосуда
- 9 мм узкий ствол увеличивает угол доступа на 44° и обеспечивает большую свободу для манипуляций в условиях ограниченного пространства в междугрберье
- Активная артикуляция на 50° в каждую сторону обеспечивает удобное позиционирование аппарата на сосуде
- Васкулярная кассета обеспечивает надежное формирование скоб на тканях
- Автоматизированный процесс прошивания гарантирует минимальное движение браншей устройства при пересечении и прошивании сосудов
- Возможность возврата ножа вручную гарантирует контроль хирурга над аппаратом даже в экстренной ситуации

ГЕМОСТАЗ:

- Улучшенный дизайн двухрядного скобочного шва
- Уменьшение расстояния между скобами для минимизации подтекания
- Толщина бранши увеличена на 9-11% для достижения оптимальной компрессии

БОЛЬШАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ГИБКОСТЬ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ

- **Большая маневренность**
Узкая 7 мм клювовидная бранша создана для атравматичной диссекции и точного позиционирования на сосуде
- **Большая гибкость**
Активная артикуляция на 50° в каждую сторону обеспечивает на 11% большую гибкость в обоих направлениях
- **Большая свобода для манипуляций**
9 мм ствол увеличивает угол доступа на 43.8° при использовании и без троакара в междугрберье

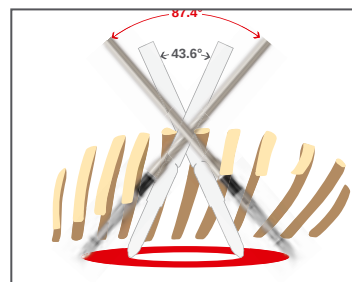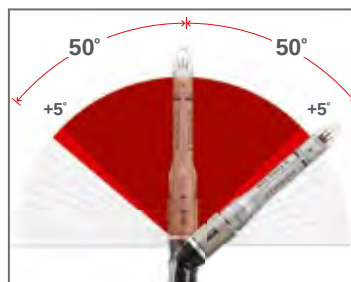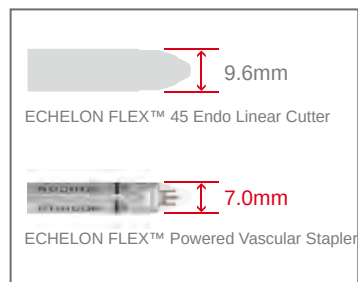

КОД	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ		ДЛИНА СТВОЛА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	
АППАРАТЫ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИЕ С КЛЮВОВИДНОЙ БРАНШЕЙ ECHELON FLEX 35					
PVE35A	35 мм		320 мм	3	
КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО РЯДОВ ШВА	ВЫСОТА ОТКРЫТОЙ СКОБКИ	ВЫСОТА ЗАКРЫТОЙ СКОБКИ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
СМЕННЫЕ КАСЕТЫ ДЛЯ АППАРАТОВ СШИВАЮЩЕ-РЕЖУЩИХ ЛИНЕЙНЫХ ECHELON FLEX 35					
СОСУДИСТАЯ ТКАНЬ					

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5514 от 22.03.2017. Товар сертифицирован.