



Облегченная сетка 3DMax™ Light

артикул	количество	описание	размер	
0117310	1 шт.	3DMax™ Light облегченная левосторонняя, средняя	7.9 см x 13.4 см	□
0117311	1 шт.	3DMax™ Light облегченная левосторонняя, большая	10.3 см x 15.7 см	□
0117312	1 шт.	3DMax™ Light облегченная левосторонняя, XL	12.2 см x 17.0 см	□
0117320	1 шт.	3DMax™ Light облегченная правосторонняя, средняя	7.9 см x 13.4 см	□
0117321	1 шт.	3DMax™ Light облегченная правосторонняя, большая	10.3 см x 15.7 см	□
0117322	1 шт.	3DMax™ Light облегченная правосторонняя, XL	12.2 см x 17.0 см	□



Официальный дистрибьютор - ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС"
E-mail: info@euro-service.ru
Тел.: +7 495 735 4225 | www.euro-service.ru



Информационный партнер | аптека нового поколения
Служба поддержки: info@omnipharm.ru
Тел.: +7 495 997 9914 | www.omnipharm.ru

Показания к применению, противопоказания, побочные действия, предупреждения, меры предосторожности и инструкции по применению см. на этикетках и листах-вкладышах соответствующих изделий и препаратов.

¹ Данные не опубликованы. В случае применения на людях результаты могут отличаться.

² Pajotin. Laparoscopic Groin Hernia Repair Using a Curved Prosthesis Without Fixation. Le Journal de Celio – Chirurgie. 1998;28:64-68.

³ Pajotin. Shaped Preformed Prosthesis in the Panetal Repair of Inguinal Hernias by Trans-pentoneal Laparoscopy. Le Journal de cello-chinergie. 1996;17:73-75.

⁴ Koch, Greenlee, et al. Randomized Prospective Study of Totally Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair: Fixation Versus No Fixation. Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, October 2006;10(4):457-460.

⁵ Bell, Price. Laparoscopic Inguinal Hernia Repair Using an Anatomically Contoured Three-Dimensional Mesh. Surgical Endoscopy, 2003;17:1784-1788.

⁶ Данное фото сетки 3DMax™ Light Mesh после протезирования сделано на анатомическом материале. Данные не опубликованы. 3DMax, Bard, Cg, Composix, CruraSoft, Davol, Didact, Dulex, Kugel, MK, PerFix, PermaFix, PermaSorb, SorbaFix SorbaFlex, Ventralex, Ventrío, Visilex являются собственными и/или зарегистрированными товарными знаками компании C. R. Bard, Inc. Serpamesh является зарегистрированным товарным знаком компании Genzyme Corporation, разрешение правообладателя на использование которого, предоставлено компании C. R. Bard, Inc.

¹¹ Компания Davol Inc. выплачивает д-ру Паджотену (Pajotin) компенсацию за использование патента/авторского права на разработку.

© Copyright 2011, C. R. Bard, Inc. All Rights Reserved.
MM3DLSS-2

Облегченная сетка 3DMax™ Light
является лишь частью полной линейки продукции для герниопластики:

Герниопротезы для пластики послеоперационных и пупочных грыж

- VENTRIO™ сетка композитная с карманами для позиционирования и фиксации
- VENTRIO™ ST сетка композитная, частично рассасывающаяся, с карманами для позиционирования и фиксации
- VENTRALEX™ заплата композитная с лентами для позиционирования и фиксации
- VENTRALEX™ ST заплата композитная, частично рассасывающаяся, с лентами для позиционирования и фиксации
- SERPMESH™ IP сетка композитная, частично рассасывающаяся
- VENTRALIGHT™ ST сетка облегченная композитная, частично рассасывающаяся
- COMPOSIX™ L/P сетка композитная облегченная, низкопрофильная
- COMPOSIX™ E/X сетка композитная
- DULEX™ заплата сепарирующая двусторонняя из ePTFE

Герниопротезы для пластики паховых грыж

- PERFIX™ плаг и заплата
- PERFIX™ LIGHT плаг и заплата облегченные
- 3DMax™ сетка анатомической формы
- 3DMax™ Light облегченная сетка анатомической формы
- BARD® SOFT MESH сетка хирургическая облегченная
- VISILEX™ сетка самораскрывающаяся
- POLYSOFT™ заплата с эффектом памяти формы
- KUGEL™ заплата с эффектом памяти формы
- MODIFIED KUGEL™ заплата с лентами и эффектом памяти формы
- BARD® сетка хирургическая стандартной или заданной формы

Специализированные герниопротезы

- Сg™ PARASTOMAL заплата хирургическая парастомальная
- CRURASOFT™ заплата для закрытия дефекта диафрагмы

Системы фиксации


- SORBAFIX™ эндогерниостеплер с рассасывающимися фиксаторами
- PERMAFIX™ эндогерниостеплер с перманентными фиксаторами
- PERMASORB™ фиксирующее устройство



DAVOL INC.

www.herniainfo.com
www.davol.com

Облегченная сетка анатомической формы 3DMax™ Light

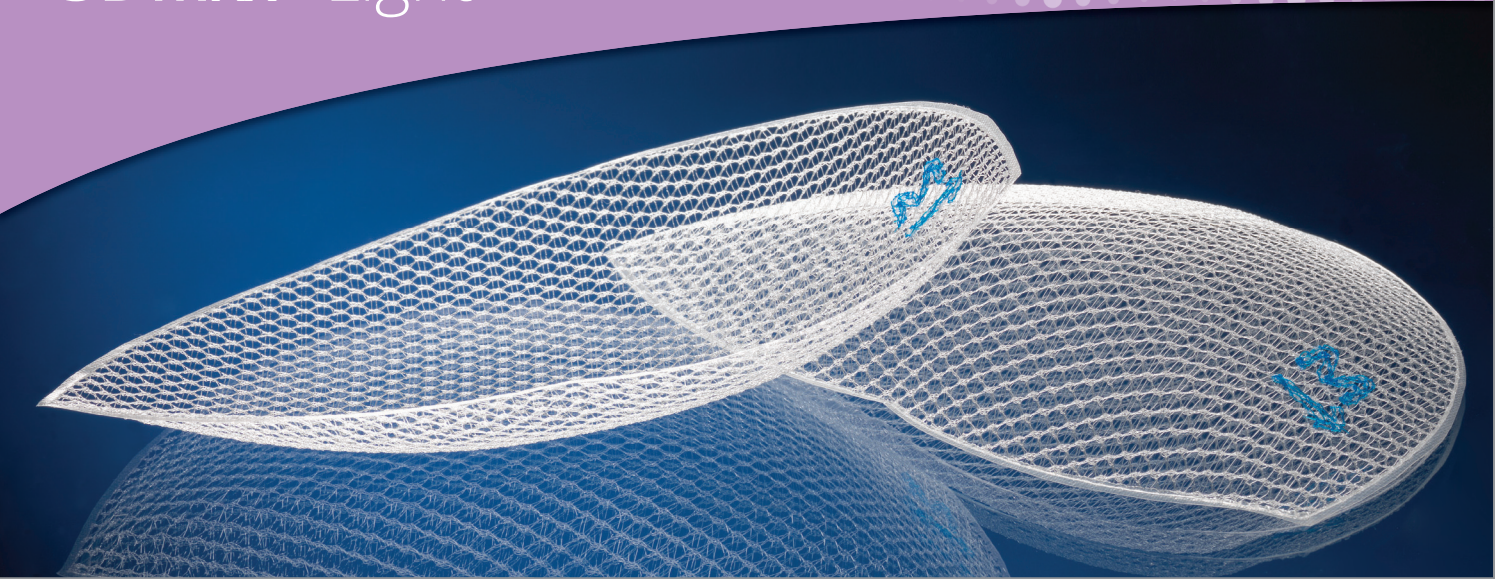

Уникальность:

- Трехмерный дизайн сетки разработан эндохирургом.
- Сетка идеально повторяет анатомические контуры паховой области.
- Благодаря специальному контуру минимизируется сморщивание и образование складок, в отличие от плоских сеток.
- Благодаря специальному дизайну минимизируется необходимость в фиксации.

Точность:


- Точность размещения и установки обеспечивается наличием медиального маркера и анатомических ориентиров.
- Эффект памяти обеспечивает постоянство формы.

Облегченный дизайн:

- Облегченная монофиламентная полипропиленовая сетка.
- Макропористое плетение обеспечивает исключительный обзор во время операции.
- По результатам исследования на животных, после установки сетки брюшная стенка сохраняет подвижность и эластичность.¹

Инновационный подход к лапароскопической пластике паховых грыж

Уникальная форма облегченной сетки 3DMax™ Light разработана эндохирургом, идеально повторяет анатомические контуры паховой области и предназначена для лапароскопической пластики паховых грыж. Объемная анатомическая форма, наличие контура с эффектом памяти и медиального маркера делают эту сетку более удобной в установке по сравнению с плоскими сетками, а также способствуют значительному сокращению времени операции. Облегченный вариант популярной во всем мире объемной сетки 3DMax™ имеет плетение с увеличенными порами. Это облегчает введение сетчатого эндопротеза через троакар и обеспечивает исключительный обзор во время операции. По результатам исследования на животных, после установки сетки брюшная стенка сохраняет подвижность и эластичность.¹

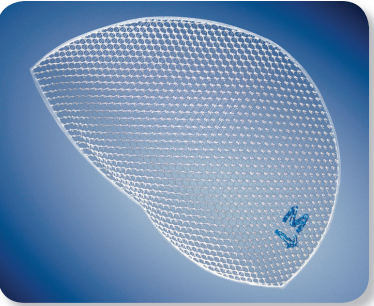

Облегченная сетка 3DMax™ Light идеально повторяет анатомические контуры паховой области и сохраняет форму после введения.




DAVOL INC.

TECHNOLOGY
TECHNIQUE
TRAINING
TRUST

УНИКАЛЬНОСТЬ:

Облегченная сетка 3DMax™ Light уникальной анатомической формы разработана специально для лапароскопической пластики паховых грыж.

Анатомическое строение паховой области является объемным. Облегченная объемная сетка 3DMax™ Light анатомической формы создана для того, чтобы идеально соответствовать анатомическим контурам, благодаря чему минимизируется сморщивание и образование складок, по сравнению с плоскими сетками, а также значительно снижается потребность в фиксации.

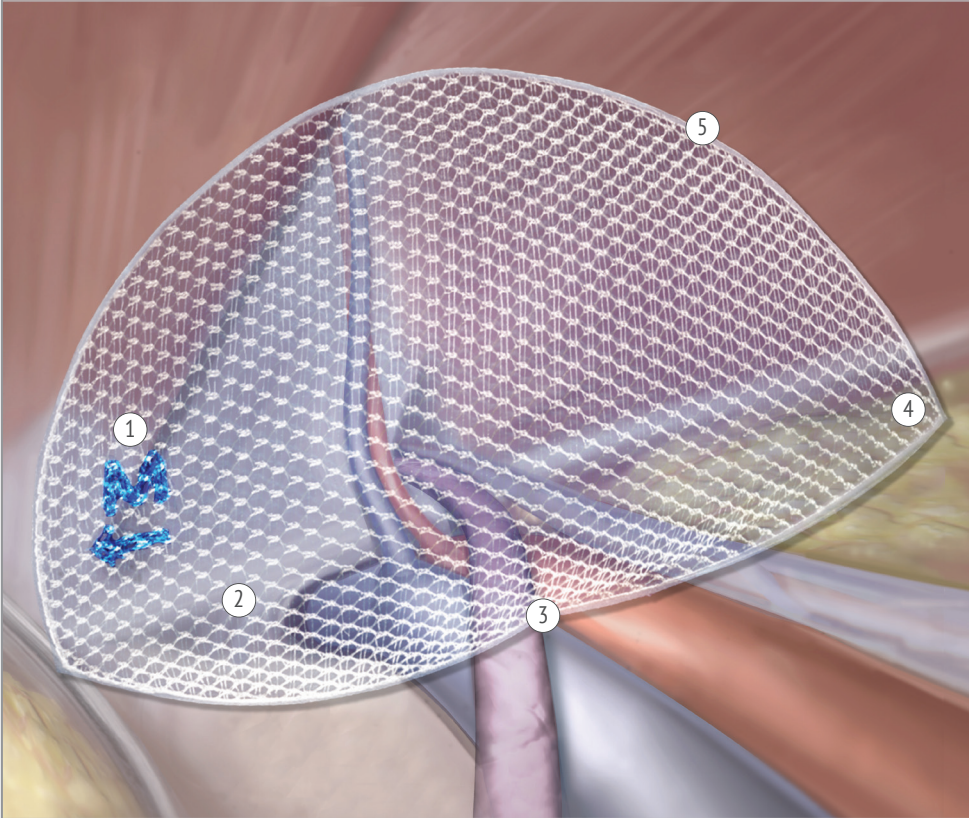

- 1 Медиальный маркер
- 2 Выступ сетки соответствует оси паховой связки
- 3 Выемка соответствует контурам внешних подвздошных сосудов
- 4 Латеральный край обеспечивает точное прилегание
- 5 Специальный контур обеспечивает эффект памяти формы

Отзывы эндохирургов о применении сетки BARD™ 3DMax™ уникальной анатомической формы:

“Сразу после введения в полость сетка расправляется, что значительно облегчает установку.”

– Philippe Pajotin, M.D.,
Polyclinic du Parc, г. Шоле, Франция^{2,††}

“Форма сетки предотвращает образование складок.”

– Philippe Pajotin, M.D.,
Polyclinic du Parc, г. Шоле, Франция^{3,††}


“Использование объемной сетки без потребности в фиксации отнюдь не усложняет операцию.”

– Cody Koch и др.,
Клиника Mayo, г. Рочестер, Миннесота⁴

“Механическая фиксация сопряжена с риском невралгии, но плоскую сетку необходимо фиксировать. Использование сетки анатомической формы, которая сокращает потребность в фиксации до нуля, поможет избежать этой проблемы.”


– R.C.W. Bell, M.D., и др.
Swedish Medical Center,
г. Энглвуд, Колорадо⁵

ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ:

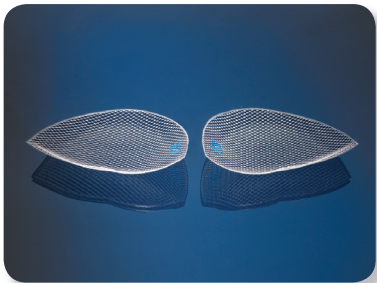

Уникальная анатомическая форма облегченной сетки 3DMax™ Light обеспечивает простоту и удобство при введении и установке сетчатого эндопротеза.

Объемная анатомическая форма, наличие контура с эффектом памяти и медиального маркера делают эту сетку более удобной в установке по сравнению с плоскими сетками, а также способствуют сокращению времени установки.

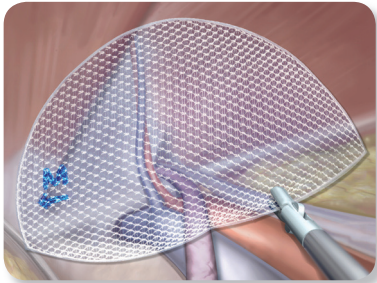


Правильно подобранный размер сетки играет важнейшую роль в результатах лечения. Облегченная сетка 3DMax™ Light анатомической формы выпускается в трех размерах, в левостороннем и правостороннем исполнении для каждого индивидуального клинического случая.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДИЗАЙН:


Облегченная сетка 3DMax™ Light анатомической формы сохраняет все свойства и характеристики популярной объемной сетки 3DMax™

Благодаря макропористому плетению вес сетки сокращается на 50% по сравнению с 3DMax™, без снижения прочности и потери эффекта памяти. Это облегчает введение сетчатого эндопротеза через троакар и обеспечивает исключительный обзор во время операции. По результатам исследования на животных, после установки сетки брюшная стенка сохраняет подвижность и эластичность.¹


Облегченный дизайн без снижения прочности.

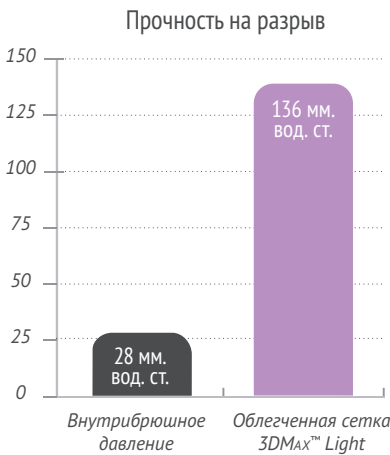

Уровень прорастания протеза тканями через 6 недель после имплантации

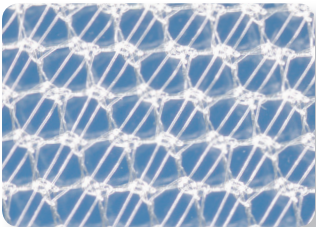

Особое плетение сетки с увеличенными порами без потери прочности

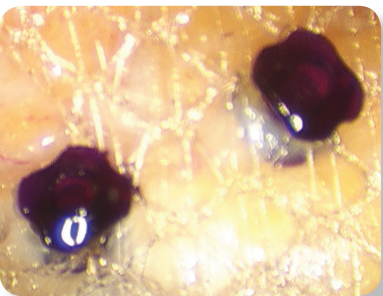

Поперечное плетение обеспечивает надежность механической фиксации⁶