



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

Medtronic
Further, Together

BIOSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Прочность, мягкость и надёжность.



Прочность, мягкость и надёжность монофиламента, как у плетёного шовного материала.

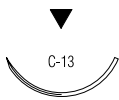
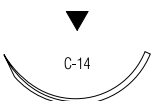
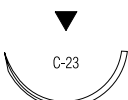
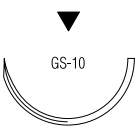
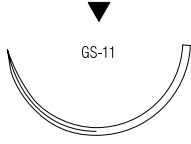
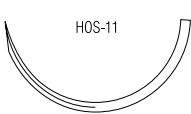
Описание материала	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира, состоящего из гликолида, диоксанона и триметилен карбоната Glycomer™ 631. Шовный материал Biosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в Фиолетовый цвет.
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Не рекомендуется применение в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Biosyn™ происходит путем гидролиза. Шовный материал распадается на гликолиевую кислоту, диаксаноновую кислоту, пропандиол и углекислый газ, которые в последствии метаболизируются в организме.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Biosyn™ определили, что примерно 75% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 90 и 110 днём.
Упаковка	Шовный материал BIOSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в Фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, в катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Biosyn™ – шовный материал, которому вы доверяете более 15 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

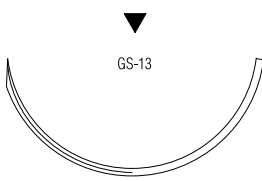
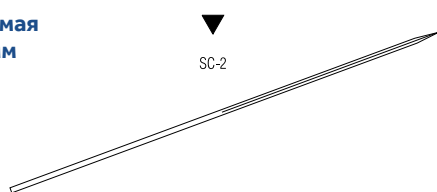
ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36		M-74
	1	4	3x45	Фиолетовый	36		M-75

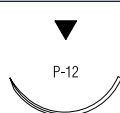
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36		SM-690
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SM-691
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		SM-822
3/8 круга 24 мм		3-0	2	75	Неокрашенный	36		SM-693
		2-0	3	75	Неокрашенный	36		SM-823
1/2 круга 24 мм		4-0	2	75	Фиолетовый	36		SM-633
		3-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SM-632
1/2 круга 26 мм		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-879
1/2 круга 37 мм		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-816
		0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-544
1/2 круга 37 мм		1	4	75	Фиолетовый	36		CM-528

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-222
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SM-643

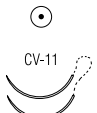
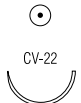
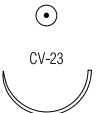
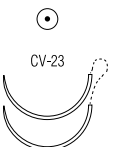
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-3625
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5688
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5687
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5690
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5624
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5627
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5637
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5628
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5638
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	24	Surgalloy™	SM-5679
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-5678
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SM-5679G

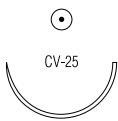
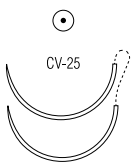
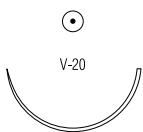
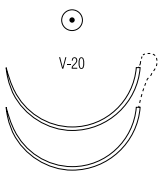
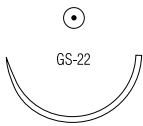
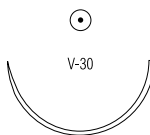
КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-845
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-822
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Dermax™	XM-823

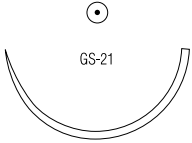
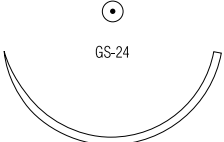
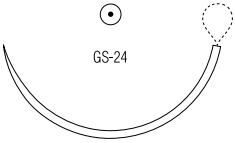
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 12 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-432
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SM-431
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CM-126
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	x75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-886
		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-986
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-875
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-201
		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-213
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-202
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-214
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-203
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UM-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-204
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UM-403
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CM-208

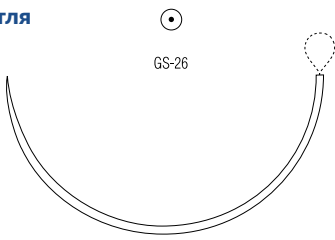
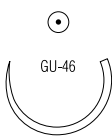
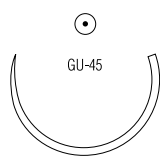
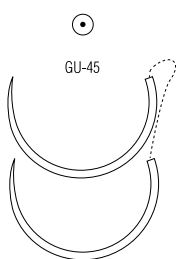
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-181
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-324
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-183
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-281
		4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-291
		3-0	2	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-282
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-121
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GM-322
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-122
		3-0	2	5 × 75	Фиолетовый	12	D-Tach™	GM-67-M
		2-0	3	75	Неокрашенный	36		GM-323
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-123
		2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-125
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-421
		4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-432
		3-0	2	90	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GM-332
1/2 круга 27 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-882
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-883
		0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-831
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-884
		1	4	75	Фиолетовый	36		CM-832
1/2 круга 30 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GM-222
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-223
		2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-326
		0	3.5	90	Фиолетовый	36		GM-327

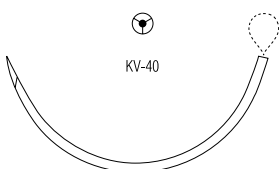
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 37 мм		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CM-810
		3-0	2	90	Фиолетовый	36		CM-922
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CM-811
		2-0	3	90	Неокрашенный	36		CM-953
		2-0	3	90	Фиолетовый	36		CM-923
		0	3.5	75	Неокрашенный	36		CM-844
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CM-812
		0	3.5	90	Неокрашенный	36		CM-954
		0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-924
		1	4	75	Неокрашенный	36		CM-845
		1	4	75	Фиолетовый	36		CM-813
		1	4	90	Фиолетовый	36		CM-925
1/2 круга 40 мм		0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-914
		1	4	90	Фиолетовый	36		CM-966
1/2 круга, петля 40 мм		1	4	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-767L
1/2 круга 48 мм		0	3.5	90	Фиолетовый	36		CM-904
		1	4	90	Фиолетовый	36		CM-905
1/2 круга, петля 48 мм		0	3.5	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-790L
		1	4	150	Фиолетовый	12	Петля	CM-776L

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга, петля 65 мм 	1	4	240	Фиолетовый	12	Петля	CM-780L
5/8 круга 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UM-879
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UM-978
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UM-878
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		UM-977
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		UM-877
5/8 круга 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UM-345
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UM-245
5/8 круга 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UM-243

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPPERCUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, Петля 75 см	CM-740L