

Автоматические эндоскопические многозарядные клиппликаторы для надежного лигирования



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клипсы:

- V-образная форма
- Длина закрытой клипсы: 8,8 мм, 11,0 мм
- Апертура открытой клипсы: 4,2 мм, 5,2 мм
- Тип закрытия клипс: дистальный
- Материал: титан
- Поперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс
- Предназначены для использования у одного пациента

Клиппликаторы:

- Длина клиппликаторов: 28,9 см, 34,1 см
- Количество клипс в аппарате: 20
- Блокировка аппарата после использования последней клипсы
- Ротация ствола: 360°
- Предназначены для использования у одного пациента

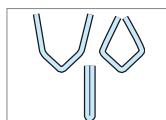

Надежная фиксация на сосудах благодаря наличию насечек на внутренней поверхности клипс



НАДЕЖНОЕ ЛИГИРОВАНИЕ:

- Клипсы надежно удерживаются на сосудах или протоках благодаря наличию продольных и поперечных насечек на внутренней поверхности клипс
- Атрауматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей
- Блокировка аппарата после использования последней клипсы препятствует повреждению сосуда

ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Храповый механизм позволяет надежно удерживать клипсу в браншах и перемещать ее по сосуду
- Дистальный тип закрытия клипс дает возможность неполного закрытия клипсы на сосудах для ее перемещения и точного позиционирования во время операции
- Тактильный и звуковой контроль закрытия клипсы на сосудах
- Автоматическая подача клипсы в бранши и индикатор оставшихся в аппликаторе клипс позволяет легко контролировать расход во время операции
- Каждый размер имеет свою цветовую маркировку для удобства выбора клиппликаторов

* И-Эр-Си-Эй

КОД	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР СТОЛА КЛИППЛИКАТОРА	ДЛИНА СТОЛА	АПЕРТУРА ОТКРЫТОЙ КЛИПСЫ	ДЛИНА ЗАКРЫТОЙ КЛИПСЫ	КОЛ-ВО КЛИПС	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
КЛИППЛИКАТОРЫ ERCA МНОГОЗАРЯДНЫЕ							
ER320	СРЕДНЕ-БОЛЬШИЕ КЛИПСЫ	10 мм	28,9 см	4,2 мм	8,8 мм	20	3
ER420	БОЛЬШИЕ КЛИПСЫ	12 мм	34,1 см	5,2 мм	11 мм	20	3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02843 от 27.04.2011. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

