

POWERSTAR*



Электрохирургические
инструменты

Биполярные ножницы

MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Лигирование сосудов до 3 мм включительно
- Длина: 115 мм, 140 мм, 180 мм, 230 мм, 280 мм
- Виды:
 - для тенотомии изогнутые;
 - меценбаума с точеными концами, изогнутые;
 - меценбаума с точеными концами;
 - меценбаума изогнутые
- Совместимость с электрохирургическими генераторами следующих производителей: AESCULAP, BERCHTOLD, MATIN, WOLF, OLYMPUS, ERBE, STORZ, PEGASYS, VALLEYLAB
- Многоразовое использование




КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Ножницы PowerStar мультифункциональны, инструмент позволяет препарировать, коагулировать и разрезать ткани одним движением
- Сокращение количества необходимых хирургических инструментов приводит к снижению времени оперативного вмешательства
- Использование биполярных инструментов снижает риск случайного повреждения соседних органов и тканей, так как электрический ток воздействует только на ткани, расположенные между лезвиями ножниц
- Специальное покрытие препятствует налипанию на бранши коагулированных тканей
- Лезвия ножниц изолированы друг от друга, представляя собой активные электроды инструмента. С этой целью одно лезвие имеет керамическое покрытие, а противоположное закалено. Монтажный винт также имеет изоляционное покрытие

БЕЗОПАСНОСТЬ БИПОЛЯРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

- Локальное воздействие электрического тока на ткань только между браншами
- Снижение риска случайного повреждения соседних органов и тканей
- Возможность применения у пациентов с кардиостимуляторами

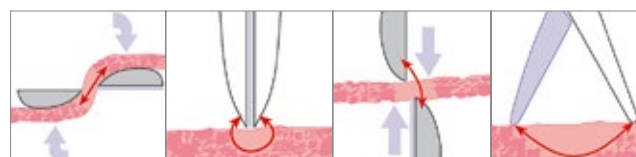

Гемостаз сосуда
до разделения

Точечная
коагуляция

Одновременная
коагуляция
и разделение

Зонная
коагуляция

* Пауэрстар

КОД	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ
БИПОЛЯРНЫЕ НОЖНИЦЫ POWERSTAR			
BP100	для тенотомии изогнутые	115 мм	1
BP120	для тенотомии изогнутые	180 мм	1
BP310	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ, ИЗОГНУТЫЕ	140 мм	1
BP320	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ, ИЗОГНУТЫЕ	180 мм	1
BP340	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ, ИЗОГНУТЫЕ	230 мм	1
BP360	МЕЦЕНБАУМА С ТОЧЕНЫМИ КОНЦАМИ	280 мм	1
BP520	МЕЦЕНБАУМА ИЗОГНУТЫЕ	180 мм	1
BP540	МЕЦЕНБАУМА ИЗОГНУТЫЕ	230 мм	1
BP560	МЕЦЕНБАУМА ИЗОГНУТЫЕ	280 мм	1
КАБЕЛИ К БИПОЛЯРНЫМ НОЖНИЦАМ POWERSTAR			
BP910	AESCULAP, BERCHTOLD, MATIN, WOLF, OLYMPUS	5 м	1
BP930	ERBE, STORZ	5 м	1
BP940	PEGASYS, VALLEYLAB	5 м	1

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02750 от 21.10.2008. Товар сертифицирован.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

