

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further, Together

TI-CRON™ / SURGIDAC™

Плетёный и монофиламентный нерассасывающийся
покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера

Шовный материал, которому Вы доверяете свыше 35 лет.



Описание материала

Нерассасывающийся, стерильный шовный материал из полиэстера Ti·Cron™ / Surgidac™ изготавливается из полиэтилена терефталата. Шовный материал состоит из волокон полиэстера с высоким молекулярным весом, длинными линейными цепочками с ароматическими кольцами в качестве связующего звена.

Плетёный шовный материал Ti·Cron™ выпускается как непокрытым, так и пропитанным силиконом для увеличения скольжения поверхности, тем самым улучшая манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла.

Монофиламентные нити Surgidac™ не покрыты, а плетёные доступны в непокрытом варианте, а также покрытом полибутиленом адипатом.

Показания

Шовный материал Ti·Cron™ / Surgidac™ из полиэстера предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.

Применение

Шовный материал из полиэстера Ti·Cron™ / Surgidac™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

Срок поддержки раны

Нерассасывающийся шовный материал Ti·Cron™ / Surgidac™ не меняет прочности in vivo.

Стерилизация

Шовный материал Ti·Cron™ / Surgidac™ размером 6-0 и менее или с прокладками стерилизуется окисью этилена. Размер 5-0 и более стерилизуется путем гамма облучения.

Упаковка

Плетёный шовный материал Ti·Cron™ возможен как в неокрашенном (белом) виде, так и окрашенном в синий D&C цвет No. 6, покрытый или не покрытый, размерами от 5 USP (7 EP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Шовный материал из полиэстера Ti·Cron™ выпускается со специальными PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Ti-Cron™ / Surgidac™

Ti-Cron™ / Surgidac™ - шовный материал, которому вы доверяете более 35 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

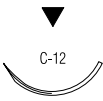
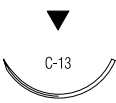
ЛИГАТУРЫ/ PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	5-0	1	12x45	Синий	36		88863008-21
	4-0	1.5	12x75	Синий	24		88863003-32
	3-0	2	12x75	Синий	24		88863003-42
	2-0	3	12x45	Синий	36		88863008-51
	2-0	3	12x75	Синий	24		88863003-52
	0	3.5	6x75	Синий	24		88863002-62
	1	4	6x45	Синий	24		88863001-72

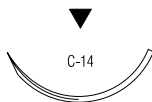
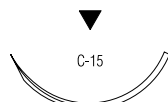
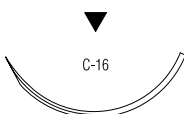
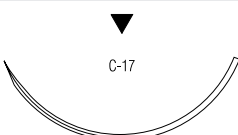
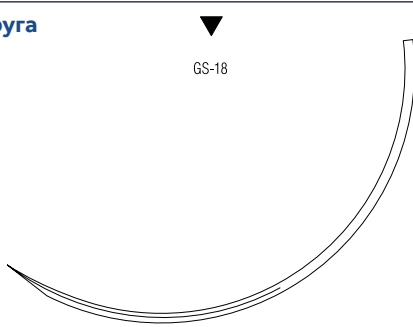
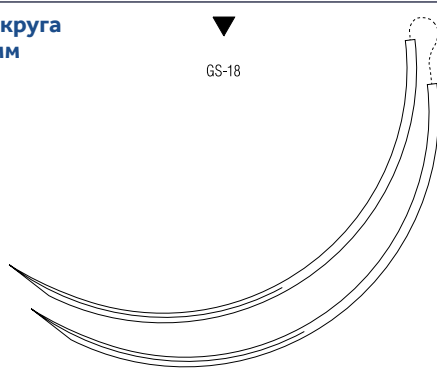
КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	2-0	3	250	Синий	24		88863380-52
	0	3.5	250	Синий	24		88863380-62
	1	4	250	Синий	24		88863380-72
	2	5	250	Синий	24		88863380-82
	4	6	150	Синий	24		88863381-09
	5	7	150	Синий	24		88863381-89

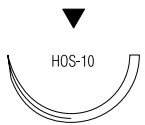
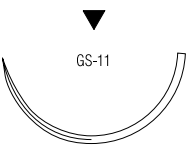
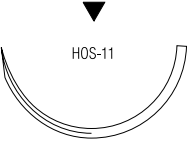
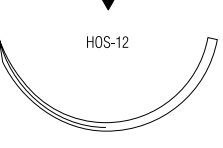
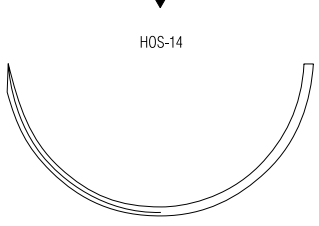
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36		88863046-31
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36		88863047-31
	3-0	2	45	Синий	36		88863047-41
	3-0	2	75	Синий	36		88863055-41
	2-0	3	75	Синий	36		88863048-51

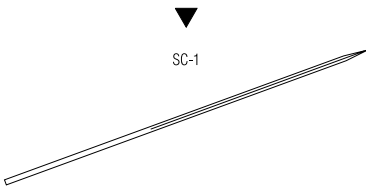
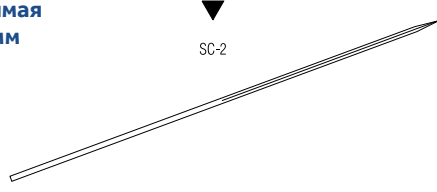
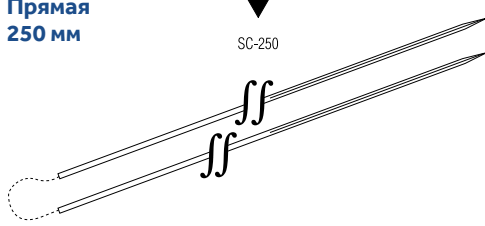
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 24 мм		3-0	2	75	Синий	36		88863050-41
		2-0	3	75	Синий	36		88863050-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863050-61
		0	3.5	90	Синий	36		88863065-61
3/8 круга 26 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863070-51
3/8 круга 30 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863023-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863023-61
		0	3.5	90	Синий	36		88863012-61
		1	4	75	Синий	36		88863023-71
3/8 круга 39 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863054-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863054-61
		1	4	75	Синий	36		88863054-71
		2	5	75	Синий	36		88863054-81
3/8 круга 77 мм		5	7	45	Синий	12		88863056-89
3/8 круга 77 мм		2	5	75	Синий	24		88863128-82

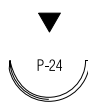
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863395-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863395-61
		1	4	75	Синий	36		88863395-71
		2	5	75	Синий	36		88863395-81
1/2 круга 37 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863309-51
		1	4	75	Синий	36		88863309-71
		4	6	75	Синий	36		88863154-09
1/2 круга 37 мм		1	4	75	Синий	36		88863028-71
1/2 круга 40 мм		2	5	75	Синий	36		88863155-81
1/2 круга 40 мм		1	4	75	Синий	36		88863026-71
		2	5	75	Синий	36		88863026-81
1/2 круга 57 мм		5	7	75	Синий	36		88863027-79

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
Прямая 51 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863163-51
		1	4	75	Синий	36		88863163-71
Прямая 60 мм		3-0	2	75	Синий	36		88863062-41
		2-0	3	75	Синий	36		88863062-51
Прямая 250 мм		2-0	3	75	Синий	12		88862947-53

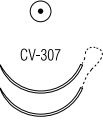
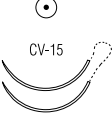
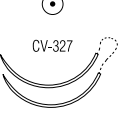
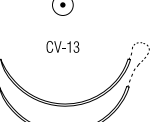
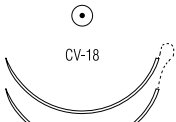
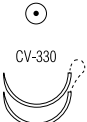
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	Белый	12	Surgalloy™	SCD-2864G
		4-0	1.5	45	Белый	12	Surgalloy™	88862862-34
1/2 круга 16 мм		2-0	3	45	Синий	12	Surgalloy™	88863059-53

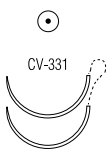
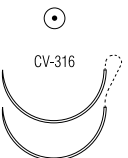
ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/4 круга 8.6 мм		6-0	0.7	45	Белый	12		CD-3113-K
		5-0	1	45	Белый	12		CD-3123-K

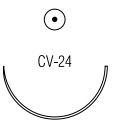
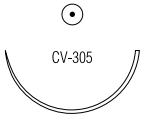
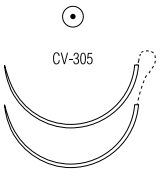
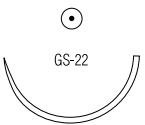
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	Синий	36	Cardioint™	88863280-11
		5-0	1	75	Синий	36	Cardioint™	88863280-21
		5-0	1	75	Белый	36	Cardioint™	88862801-21
		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863280-31
		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863314-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863280-41
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863229-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863229-41
3/8 круга 17 мм		2-0	3	90	Белый	6	Surgalloy™	88862636-56
3/8 круга 18 мм		5-0	1	75	Синий	36	Cardioint™	88862775-21
		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88862775-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88862775-41
3/8 круга 22 мм		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	88862627-41
3/8 круга 26 мм		2-0	3	10x90	Синий / белый	6		88863230-56
1/2 круга 10 мм		5-0	1	90	Синий	36	Cardioint™	88863139-21
		5-0	1	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863297-21
1/2 круга 13 мм		5-0	1	60	Синий	36	Cardioint™	8886322621
		4-0	1.5	60	Синий	36	Cardioint™	8886322631
		4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	8886324931
		3-0	2	45	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	8886329541

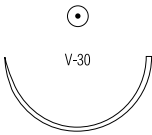
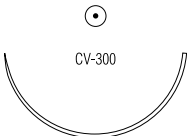
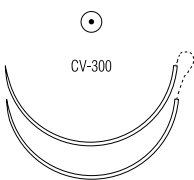
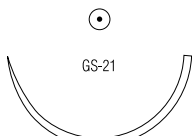
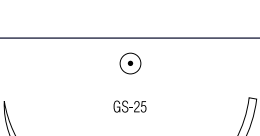
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 16 мм		5-0	1	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-21
		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863186-51
1/2 круга 16 мм		5-0	1	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-21
		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-31
		4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-41
		3-0	2	10x75	Синий	6	Cardioint™	88863084-46
		3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863271-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863087-51
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863083-56
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863086-56
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20331FE
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863091-56
		2-0	3	10x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863269-56
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863227-41
		3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863227-51
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20316FE
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD20316SE
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD20316MFE
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD20316MSE
		2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863385-56
		2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x3 мм жёсткие	88863277-56
		2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863323-56
		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863369-51
		2-0	3	90	Белый	36	Cardioint™	88862839-51

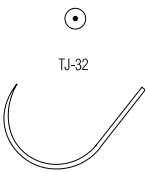
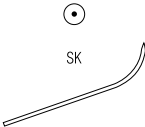
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 20 мм		3-0	2	5x45	Синий	24	D-Tach™	88863267-42
1/2 круга 22 мм		0	3.5	5x45	Синий	24	D-Tach™	88863257-62
1/2 круга 25 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-31
		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-51
		0	3.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-61
		1	4	75	Синий	36	Cardioint™	88863185-71
1/2 круга 25 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-31
		3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-41
		2-0	3	8x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD20305MFE
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD20305FE
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм мягкие овал	VCD20305SE
		2-0	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм мягкие овал	VCD20305MSE
		2-0	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 4.5x6 мм жёсткие овал	VCD2030556MFE
		2-0	3	75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 4.5x6 мм мягкие овал	VCD2030556MSE
		2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88863356-56
		2-0	3	10x75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863324-56
		2-0	3	8x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокл. 3x6 мм жёсткие овал	VCD2036305FE
		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-51
		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863336-51
		2-0	3	10x90	Синий / Белый	6	Cardioint™	88862981-56
		2-0	3	6x90	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863306-56
		0	3.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863256-61
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863093-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863093-61

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 27 мм		2	5	5x45	Синий	24		88863372-82
1/2 круга 30 мм		3-0	2	75	Синий	36		88863205-41
		2-0	3	75	Синий	36		88863205-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863205-61
1/2 круга 35 мм		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863082-51
		0	3.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863082-61
1/2 круга 35 мм		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863393-51
		0	3.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863274-61
1/2 круга 37 мм		2-0	3	75	Синий	36		88863090-51
		0	3.5	75	Синий	36		88863090-61
		1	4	75	Синий	36		88863090-71
1/2 круга 37 мм		1	4	75	Синий	36		88863113-71
		2	5	75	Синий	36		88863113-81
		5	7	75	Синий	36		88863111-79
1/2 круга 40 мм		2	5	75	Синий	36		88863376-81
1/2 круга 48 мм		0	3.5	75	Синий	36		88863097-61
		1	4	75	Синий	36		88863097-71

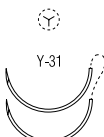
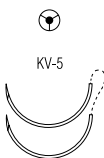
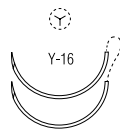
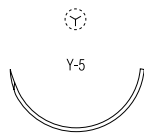
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
Ј-игла 32 мм		1	4	75	Синий	36		88863103-71
Лыжа 23 мм		2-0	3	120	Синий	36		88863017-51
		0	3.5	120	Синий	36		88863017-61

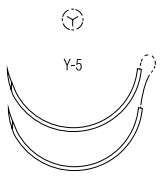
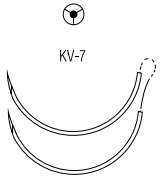
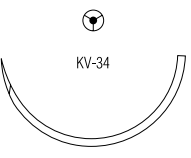
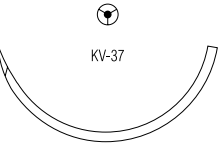
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 18 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	Cardioint™	88863107-31
3/8 круга 18 мм		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863182-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863182-51
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863233-51
		2-0	3	10x75	Синий / белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863365-56
		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88862631-51
		2-0	3	10x90	Синий / белый	6	Cardioint™	88863052-56
		2-0	3	10x90	Синий / белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88862658-56

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 16 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-31
		3-0	2	75	Белый	36	Cardioint™	88862880-41
		3-0	2	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863125-51
		2-0	3	75	Белый	36	Cardioint™	88862880-51
		2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Cardioint™	88862877-56
		2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863221-56
		2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863218-56
		2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863219-56
		2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм жёсткие овал	VCD2031MFE
		2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Cardioint™ Прокладки 3x6 мм мягкие овал	VCD2031MSE
		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863160-51
		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863204-51
		2-0	3	90	Белый	36	36 Cardioint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88862808-51
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-31
		3-0	2	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-41
		2-0	3	10X75	Синий / Белый	6	Surgalloy™	88862879-56
		2-0	3	8X75	Синий / Белый	6	Surgalloy™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863235-56
		2-0	3	90	Синий	36	Surgalloy™	88863159-51
1/2 круга 20 мм		2-0	3	90	Синий	36	Cardioint™	88863157-51
1/2 круга 26 мм		3-0	2	75	Синий	36	Cardioint™	88863088-41
		2-0	3	75	Синий	36	Cardioint™	88863088-51

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 26 мм		3-0	2	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-41
		2-0	3	10x75	Синий/белый		Cardiopoint™	88863222-56
		2-0	3	75	Синий	36	Cardiopoint™	88863202-51
		2-0	3	10x90	Синий/белый		Cardiopoint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863290-56
		2-0	3	90	Синий	36	Cardiopoint™ Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863212-51
		2-0	3	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-51
		2-0	3	90	Белый	36	Cardiopoint™	88862815-51
		0	3.5	90	Синий	36	Cardiopoint™	88863167-61
1/2 круга 26 мм		2-0	3	8x75	Синий/белый	36	Прокладки 3x7 мм жёсткие	88863240-56
1/2 круга 26 мм		0	3.5	90	Синий	36		88863119-61
1/2 круга 40 мм		0	3.5	75	Синий	36		88863092-61
		1	4	75	Синий	36		88863092-71

ПРОКЛАДКИ / PLEDGETS

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
PTFE прямоугольные					10x36	3x3 мм жёсткие	88868675-01
					10x36	3x7 мм жёсткие	88868677-01
					10x36	3x7 мм мягкие	88868682-01
					5x36	9.5x4.8 мм жёсткие	88868679-01
					5x36	9.5x4.8 мм мягкие	88868678-01



MedicHome.ru