

Описание материала:	Плетеный шовный материал из полиамида SURGILON™ — инертен и не рассасывается. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6. Плетеные нити равномерно покрыты силиконом для улучшения манипуляционных характеристик и уменьшения капиллярности.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул нейлона и покрытие обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами - плотное плетение и постоянный диаметр нити - максимальная эластичность - превосходная надежность аккуратного и ровного узла - превосходные манипуляционные свойства - превосходная и постоянная прочность узла
Показания:	Плетеный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал SURGILON™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, торакальной, пластической, косметической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Действие:	Плетеный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал SURGILON™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
Стерилизация:	Этилен оксид или гамма облучение.
Упаковка:	Плетеный нейлоновый шовный материал SURGILON™ производится как неокрашенным (белым), так и в черном цвете размерами от 2 (метрический размер 5) до 7-0 (метрический размер 0.5). Стерильный шовный материал SURGILON™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с иглами, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.

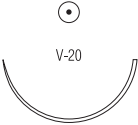
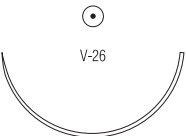
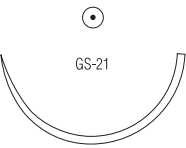
Без игл / Non Needled

Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	3-0	2	12x45	Черный	36	1918-41
	3-0	2	7x75	Черный	36	1919-41
	2-0	3	12x45	Белый	36	1899-51
	2-0	3	7x75	Черный	36	1919-51
	0	3.5	7x75	Черный	36	1919-61
	1	4	6x45	Белый	36	1902-71
	1	4	7x75	Черный	36	1919-71
	2	5	6x45	Черный	24	1917-82
Катушки	0	3.5	250	Черный	24	1920-62

Обратно режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	75	Черный	36	1935-41
	2-0	3	75	Черный	36	1935-51
3/8 КРУГА 30 мм 	2-0	3	3x45	Черный	24	1936-52
	2-0	3	75	Черный	36	1883-51
	0	3.5	75	Черный	36	1883-61
1/2 КРУГА 30 мм 	1	4	75	Черный	36	1941-71
1/2 КРУГА 40 мм Н 	1	4	75	Черный	36	1895-71

Surgilon™ Плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиамида

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 17 мм 	3-0	2	75	Черный	36	1995-41	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	5x45	Черный	24	D-TACH™ 1958-52	
	2-0	3	75	Черный	36	1951-51	
	0	3.5	75	Черный	36	1951-61	
1/2 КРУГА 37 мм 	1	4	75	Черный	36	1949-71	
1/2 КРУГА 37 мм 	1	4	75	Черный	36	1971-71	



MedicHome.ru