



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ **ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019



MedicHome.ru

медицинские изделия

8 (495) 640-61-19

Medtronic

Further, Together

V-LOC™ 90

Рассасывающееся устройство для ушивания ран

Надёжно. Быстро. Эффективно.



Революционная технология
сопоставления тканей
без завязывания узлов.

Описание материала

V-Loc™ 90 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов.

V-Loc™ 90 изготовлен из синтетического полиэфира: композиции гликолида, диаксанона и триметилен карбоната. V-loc 90 выпускается как неокрашенным, так и фиолетовым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.

Показания

V-Loc™ 90 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.

Применение

V-Loc™ 90 вызывает лишь минимальную воспалительную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани. Постепенная потеря прочности и полная абсорбция V-Loc™ 90 происходит путем гидролиза: рассасывающееся устройство для закрытия ран разрушается до гликолевой и диаксаноновой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые метаболизируются в организме.

Срок поддержки раны

Не менее 90% начальной прочности сохраняется в течение первой недели, не 75% в течение второй недели после имплантации.

Стерилизация

Окись этилена.

Рассасывание

Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается между 90 и 110 днями.

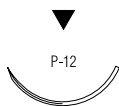
Упаковка

Шовный материал V-LOC™ 90 производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2-0 USP (3 EP) до 4-0 USP (1.5 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт.

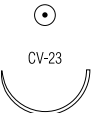
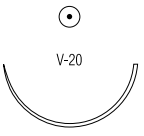
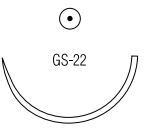
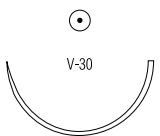
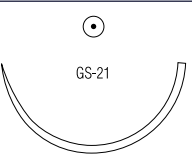
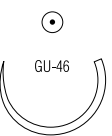
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

V-Loc™ 90

V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками со средним сроком рассасывания.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЗУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	15	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0003
		4-0	1.5	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0013
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0023
		4-0	1.5	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0033
		3-0	2	15	Неокрашенный	12		VLOCM0004
		3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCM0014
		3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCM0024
		3-0	2	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0034
		2-0	3	15	Неокрашенный	12		VLOCM0005
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0123
		3-0	2	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0114
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0124
		3-0	2	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCM0134
		2-0	3	15	Неокрашенный	12		VLOCM0125
		2-0	3	58	Неокрашенный	12		VLOCM0135
3/8 круга 30 мм		3-0	2	45	Неокрашенный			VLOCM1824

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	15	Фиолетовый	12		VLOCM1203
		3-0	2	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM1204
1/2 круга 17 мм		3-0	2	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0804
		3-0	2	23	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0844
		3-0	2	30	Фиолетовый	12		VLOCM0814
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	15	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0603
		3-0	2	15	Фиолетовый	12		VLOCM0604
		3-0	2	23	Фиолетовый	12	Surgalloy™	VLOCM0644
		3-0	2	30	Фиолетовый	12		VLOCM0614
		3-0	2	45	Фиолетовый	12		VLOCM0624
		2-0	3	45	Фиолетовый	12		VLOCM0625
1/2 круга 27 мм		2-0	3	15	Фиолетовый	12		VLOCM2105
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM2145
		2-0	3	30	Фиолетовый	12		VLOCM2115
1/2 круга 30 мм		3-0	2	23	Фиолетовый	12		VLOCM1544
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM1545
1/2 круга 37 мм		2-0	3	15	Фиолетовый	12		VLOCM0305
		2-0	3	23	Фиолетовый	12		VLOCM0345
		2-0	3	30	Фиолетовый	12		VLOCM0315
5/8 круга 27 мм		3-0	2	15	Фиолетовый	12		VLOCM1704
		3-0	2	23	Фиолетовый	12		VLOCM1744

V-LOC™ 180

Рассасывающееся устройство для ушивания ран

Надёжно. Быстро. Эффективно.

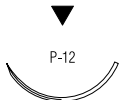


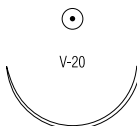
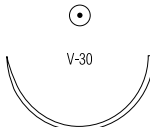
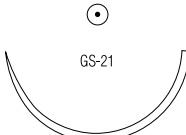
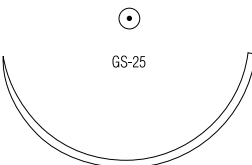
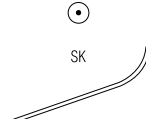
Революционная технология
сопоставления тканей
без завязывания узлов.

Описание материала	V-Loc™ 180 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ 180 изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната. V-Loc™ 180 выпускается как неокрашенным, так и зеленым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
Показания	V-Loc™ 180 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
Применение	Исследования на животных показали, что V-Loc™ 180 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания V-Loc™ 180. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.
Срок поддержки раны	Исследования демонстрируют следующую потерю прочности в узле в процентах по USP и EP, в зависимости от диаметра нити. Примерно 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев.
Упаковка	Шовный материал V-LOC™ 180 производится в бесцветном варианте или окрашенном в зеленый цвет. Возможные варианты размеров от 0 USP (3.5 EP) до 4-0 USP (1.5 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

V-Loc™ 180

V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками с длительным сроком рассасывания.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING							
Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCL0023
	4-0	1.5	58	Неокрашенный	12	Surgalloy™	VLOCL0033
	3-0	2	15	Неокрашенный	12		VLOCL0004
	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCL0014
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCL0024
	3-0	2	60	Неокрашенный	12		VLOCL0034
	2-0	3	45	Неокрашенный	12		VLOCL0025
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	30	Неокрашенный	12		VLOCL0114
	3-0	2	45	Неокрашенный	12		VLOCL0124
	3-0	2	60	Неокрашенный	12		VLOCL0134
	2-0	3	60	Неокрашенный	12		VLOCL0135

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	15	Зеленый	12		VLOCL0803
		4-0	1.5	30	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0813
		3-0	2	15	Зеленый	12		VLOCL0804
		3-0	2	23	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0844
		3-0	2	30	Зеленый	12		VLOCL0814
		3-0	2	45	Зеленый	12		VLOCL0824
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	30	Зеленый	12		VLOCL0613
		3-0	2	15	Зеленый	12		VLOCL0604
		3-0	2	23	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0644
		3-0	2	30	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0614
		3-0	2	45	Зеленый	12	Surgalloy™	VLOCL0624
		2-0	3	30	Зеленый	12		VLOCL0615
		2-0	3	45	Зеленый	12		VLOCL0625
1/2 круга 27 мм		2-0	3	23	Зеленый	12		VLOCL2145
1/2 круга 30 мм		3-0	2	23	Зеленый	12		VLOCL1544
1/2 круга 37 мм		2-0	3	30	Зеленый	12		VLOCL0315
		2-0	3	45	Зеленый	12		VLOCL0325
		2-0	3	60	Зеленый	12		VLOCL0335
		0	3.5	30	Зеленый	12		VLOCL0316
		0	3.5	30	Зеленый	12		VLOCL0316
		0	3.5	45	Зеленый	12		VLOCL0326
		0	3.5	60	Зеленый	12		VLOCL0336
1/2 круга 48 мм		0	3.5	45	Зеленый	12		VLOCL0426
		0	3.5	60	Зеленый	12		VLOCL0436
Лыжа 23 мм		3-0	2	23	Зеленый	12		VLOCL2744

V-LOC™ PBT

Нерассасывающееся устройство для ушивания ран из полибутэстера

Надёжно. Быстро. Эффективно.

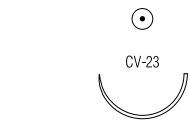
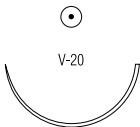
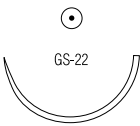
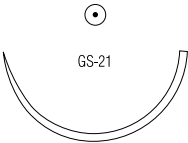


Революционная технология
сопоставления тканей
без завязывания узлов.

Описание материала	V-Loc™ PBT – нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ PBT изготовлен из полибутэстера – кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолевого эфира. V-Loc™ PBT выпускается окрашенным в синий цвет. Устройство стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
Показания	V-Loc™ PBT предназначен для сопоставления мягких тканей, когда необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность V-Loc™ PBT не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
Применение	Исследования на животных показали, что V-Loc™ PBT вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.
Срок поддержки раны	Постоянная поддержка.
Стерилизация	Гамма излучение.
Рассасывание	Не рассасывается.
Упаковка	Шовный материал V-LOC™ PBT производится в окрашенном в синий цвет. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 EP) до 3-0 USP (2 EP). Стерильный шовный материал поставляется с различными видами перманентно зафиксированных игл. Формируется в коробках по 12 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

V-Loc™ PBT

V-Loc™ PBT - нерассасывающееся устройство для ушивания ран с однонаправленными насечками.

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT								
Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		3-0	2	30	Синий	12	Surgalloy™	VLOCN0814
1/2 круга 26 мм		2-0	3	30	Синий	12		VLOCN0615
		3-0	2	23	Синий	12		VLOCN0644
1/2 круга 27 мм		0	3.5	45	Синий	12		VLOCN1126
1/2 круга 37 мм		1	4	45	Синий	12		VLOCN0327
		0	3.5	45	Синий	12		VLOCN0326
		2-0	3	45	Синий	12		VLOCN0325