

# PGA RESORBA



## Описание

ПГА-РЕСОРБА представляет собой синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из полимера гликолевой кислоты. Плетеная нить снабжена покрытием из резолактона (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Это покрытие инертно, лишено антигенной активности и апиrogenно. ПГА-РЕСОРБА окрашивается в ходе полимеризации путем добавления красителя D&C фиолетового № 2.

## Область применения

ПГА-РЕСОРБА предназначена для сшивания мягких тканей и/или для наложения лигатур, включая применение в офтальмологии. В отношении применения ПГА-РЕСОРБА в операциях на сердце и центральной системе кровообращения достаточные данные пока отсутствуют.

## Действие

ПГА-РЕСОРБА обуславливает вначале лишь небольшую воспалительную реакцию, за которой следует постепенное, медленное формирование соединительной капсулы. Постепенное снижение прочности на разрыв шовного материала ПГА-РЕСОРБА является следствием гидролитического разложения гликолевой кислоты, которая постепенно рассасывается и метаболизируется в организме. В ходе резорбции вначале снижается прочность на разрыв, затем уменьшается масса. Остаточная прочность: 80% - через 7 дней, 50% - через 14 дней, 25% - через 21 день.

Так как ПГА-РЕСОРБА способна рассасываться, то этот материал не должен применяться для ушивания ран, на края которых воздействуют значительные растягивающие усилия.

| Nadel / needle                                                                                          | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>5/8-Kreis Rundkörper = FR</b><br><i>5/8 circle, round bodied = FR</i>                                |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● FR 27</b><br>     | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 1011               | 24                                             |
|                                                                                                         | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 1019               | 24                                             |
|                                                                                                         | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1015               | 24                                             |
|                                                                                                         | 1                                        | 4   | 0,70              | violett/violet       | PA 10110              | 24                                             |
| <b>● FR 35</b><br>     | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1013               | 24                                             |
|                                                                                                         | 1                                        | 4   | 0,70              | violett/violet       | PA 1014               | 24                                             |
| <b>● 2 x FR 35</b><br> | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 1012               | 24                                             |
|                                                                                                         | 0                                        | 3.5 | 0,90              | violett/violet       | PA 1018               | 24                                             |
| <b>● FR 40</b><br>   | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1016               | 24                                             |
| <b>1/2-Kreis Rundkörper = HR, HRS, HRX</b><br><i>1/2 circle, round bodied = HR, HRS, HRX</i>            |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HR 10</b><br>   | 5-0                                      | 1   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10262              | 24                                             |
| <b>● HR 12</b><br>   | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | violett/violet       | PA 10273              | 24                                             |
|                                                                                                         | 5-0                                      | 1   | 0,45              | violett/violet       | PA 10274              | 24                                             |
|                                                                                                         | 6-0                                      | 0.7 | 0,70              | violett/violet       | PA 1021               | 24                                             |
|                                                                                                         | 5-0                                      | 1   | 0,70              | violett/violet       | PA 1022               | 24                                             |
|                                                                                                         | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1023               | 24                                             |
|                                                                                                         | 6-0                                      | 0.7 | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10242              | 24                                             |
|                                                                                                         | 5-0                                      | 1   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10265              | 24                                             |
|                                                                                                         | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10266              | 24                                             |
| <b>● HRS 12</b><br>  | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 10328              | 24                                             |
|                                                                                                         | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 10329              | 24                                             |
|                                                                                                         | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 10330              | 24                                             |

# PGA RESORBA®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

| Nadel / needle                                                                                                                                 | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | USP                     | metric |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HR 17</b><br>                                             | 5-0                     | 1      | 0,70              | violett/violet       | PA 1024               | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 1025               | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 1026               | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 1027               | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 5-0                     | 1      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10248              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10243              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10244              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10258              | 24                                             |
|                                                                                                                                                |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HRS 17</b><br>                                            | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10378              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10379              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet       | PA 10380              | 24                                             |
| <b>● HR 17 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle | 5-0                     | 1      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10256<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 4-0                     | 1.5    | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10287<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10288<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 4-0                     | 1.5    | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 1028<br>Multipack  | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 1029<br>Multipack  | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 4-0                     | 1.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10284<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HR 22</b><br>                                           | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10210              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 10211              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10212              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10283<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10254              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10255              | 24                                             |
|                                                                                                                                                |                         |        |                   |                      |                       |                                                |

# PGA RESORBA®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

| Nadel / needle                                                                                                                                   | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour   | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | USP                     | metric |                   |                |                       |                                                |
| <b>● HR 22 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle    | 4-0                     | 1.5    | 4 x 0,45          | violett/violet | PA 10252<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 3-0                     | 2      | 4 x 0,45          | violett/violet | PA 10286<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 2-0                     | 3      | 4 x 0,45          | violett/violet | PA 10276<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 4-0                     | 1.5    | 8 x 0,45          | violett/violet | PA 10213<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 3-0                     | 2      | 8 x 0,45          | violett/violet | PA 10214<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 2-0                     | 3      | 8 x 0,45          | violett/violet | PA 10215<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 3-0                     | 2      | 4 x 0,70          | violett/violet | PA 10241<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 4-0                     | 1.5    | 8 x 0,70          | violett/violet | PA 10285<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                  | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet | PA 10331              | 24                                             |
|                                                                                                                                                  | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet | PA 10332              | 24                                             |
| <b>● HRS 22</b><br>                                            | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet | PA 10333              | 24                                             |
|                                                                                                                                                  |                         |        |                   |                |                       |                                                |
|                                                                                                                                                  |                         |        |                   |                |                       |                                                |
| <b>● HRS 22 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle | 0                       | 3.5    | 4 x 0,70          | violett/violet | PA 10357<br>Multipack | 12                                             |

# PGA RESORBA®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

| Nadel / needle                                                                                                                                | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | USP                     | metric |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HR 27</b><br>                                            | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10216              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 10217              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10218              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10219              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 4-0                     | 1.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 10220              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 0,90              | violett/violet       | PA 10221              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 0,90              | violett/violet       | PA 10222              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                       | 3.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 10223              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10250              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10251              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                       | 3.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10253              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 6 x 0,70          | violett/violet       | PA 10249<br>Multipack | 12                                             |
| <b>● HR 27 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle | 4-0                     | 1.5    | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10227<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10228<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10229<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 4-0                     | 1.5    | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10224<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10225<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10226<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 10280              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 4-0                     | 1.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10230<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10231<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10232<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 0                       | 3.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10261<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 3-0                     | 2      | 4 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PA 10263<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 4 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PA 10264<br>Multipack | 12                                             |
| <b>● HRS 27</b><br>                                         | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 1030               | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 1031               | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet       | PA 1032               | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2                       | 5      | 0,70              | violett/violet       | PA 10334              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 0,90              | violett/violet       | PA 10335              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                       | 3.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 1033               | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 1034               | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2                       | 5      | 0,90              | violett/violet       | PA 1035               | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                       | 4      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10364<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2                       | 5      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10351<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10353              | 24                                             |

# PGA RESORBA®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

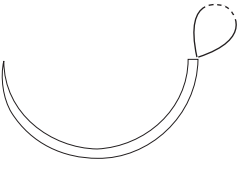
| Nadel / needle                                                                                                                                 | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | USP                     | metric |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HRS 27 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle | 2-0                     | 3      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10336<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | 3.5    | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10337<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 1                       | 4      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10338<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | 3.5    | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10348<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 1                       | 4      | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10372<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | 3.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10339<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 1                       | 4      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10340<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                | 2                       | 5      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10341<br>Multipack | 12                                             |
| <b>● HRX 27</b><br>                                          | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 1041               | 24                                             |
| <b>● HRX 27 A</b><br>                                       | 1                       | 4      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 1045<br>Multipack  | 12                                             |
| <b>● HR 30</b><br>                                          | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 10245              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10233              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10234              | 24                                             |
| <b>● HR 30 A</b><br>                                        | 0                       | 3.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10270<br>Multipack | 12                                             |
| <b>● HRX 30</b><br>                                         | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 1042               | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2                       | 5      | 0,90              | violett/violet       | PA 1043               | 24                                             |
| <b>● HR 35</b><br>                                          | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 10246              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10235              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | .5     | 0,70              | violett/violet       | PA 10236              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet       | PA 10237              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 0,90              | violett/violet       | PA 10247              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 2-0                     | 3      | 0,90              | violett/violet       | PA 10238              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 0                       | 3.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 10239              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 10240              | 24                                             |
|                                                                                                                                                | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10272              | 24                                             |

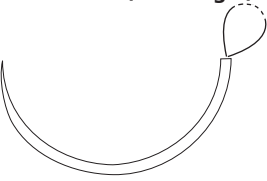
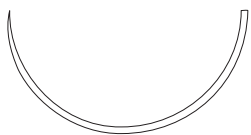
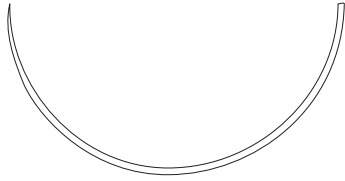
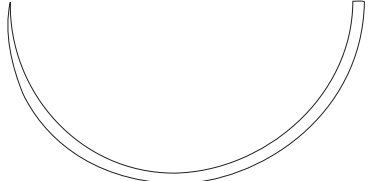
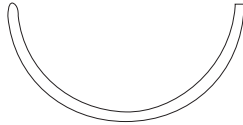
# PGA RESORBA®

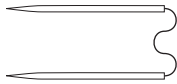
## Sterile Nadel-Faden-Kombination

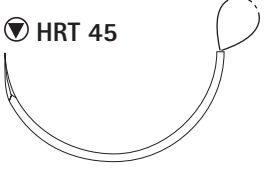
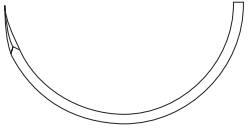
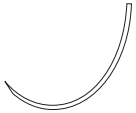
Needle - suture - combination, sterile

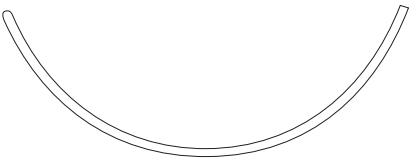
| Nadel / needle                                                                                                                                  | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | USP                     | metric |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HR 35 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle    | 3-0                     | 2      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10277<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 2-0                     | 3      | 8 x 0,70          | violett/violet       | PA 10269<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 0                       | 3.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10267<br>Multipack | 12                                             |
| <b>● HRS 35</b><br>                                             | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 1037               | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 1038               | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet       | PA 1039               | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 3-0                     | 2      | 0,90              | violett/violet       | PA 10371              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 2-0                     | 3      | 0,90              | violett/violet       | PA 10310              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 0                       | 3.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 10311              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 10312              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 2                       | 5      | 0,90              | violett/violet       | PA 10313              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 2-0                     | 3      | 0,90              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10349              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 | 2                       | 5      | 0,90              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10376              | 24                                             |
|                                                                                                                                                 |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| <b>● HRS 35 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle | 0                       | 3.5    | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10314<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 1                       | 4      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10315<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 2                       | 5      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10316<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 0                       | 3.5    | 8 x 0,50          | violett/violet       | PA 10324<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 0                       | 3.5    | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10342<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 1                       | 4      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10343<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 2                       | 5      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10344<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 1                       | 4      | 4 x 0,90          | violett/violet       | PA 10350<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 0                       | 3.5    | 4 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PA 10360<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 | 1                       | 4      | 4 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PA 10361<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                                 |                         |        |                   |                      |                       |                                                |

| Nadel / needle                                                                                                                            | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | USP                     | metric |                   |                      |                       |                                                |
| ● HRX 35<br>                                             | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 1047               | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet       | PA 1046               | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 1044               | 24                                             |
| ● HR40<br>                                               | 2-0                     | 3      | 0,90              | violett/violet       | PA 10282              | 24                                             |
| ● HRS 40<br>                                             | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10370              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10317              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,70              | violett/violet       | PA 10318              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 0                       | 3.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 10319              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 10320              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 2                       | 5      | 0,90              | violett/violet       | PA 10321              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 0                       | 3.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10355              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 0                       | 3.5    | 0,90              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10362              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,90              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10363              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 1,50              | violett/violet       | PA 10322              | 24                                             |
| ● HRS 40 / Schlinge / loop<br>                         |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| ● HRS 40 A<br><br>Abziehnadel / control release needle | 1                       | 1      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10323<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                           | 2                       | 5      | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 10345<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                           | 2-0                     | 3      | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10365<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 8 x 0,45          | violett/violet       | PA 10373<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                           | 2                       | 5      | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10375<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                           |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| ● HRS 48<br>                                           | 3-0                     | 2      | 0,70              | violett/violet       | PA 10359              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 10368              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 10377              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 0                       | 3.5    | 0,90              | violett/violet       | PA 10325              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,90              | violett/violet       | PA 10326              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 2                       | 5      | 0,90              | violett/violet       | PA 10327              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 2                       | 5      | 1,20              | violett/violet       | PA 10354              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 1                       | 4      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10356              | 24                                             |
|                                                                                                                                           | 2                       | 5      | 0,90              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10374              | 24                                             |
|                                                                                                                                           |                         |        |                   |                      |                       |                                                |

| Nadel / needle                                                                                                                                | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m     | Farbe/colour   | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>● HRS 48 / Schlinge / loop</b><br>                         | 0                                        | 3.5 | 1,50<br>Schlinge/loop | violett/violet | PA 10366              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                                        | 4   | 1,50<br>Schlinge/loop | violett/violet | PA 10352              | 24                                             |
| <b>● HRS 48 A</b><br><br>Abziehnadel / control release needle | 1                                        | 4   | 4 x 0,45              | violett/violet | PA 10346<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2                                        | 5   | 4 x 0,45              | violett/violet | PA 10347<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 2                                        | 5   | 8 x 0,45              | violett/violet | PA 10369<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                               | 1                                        | 4   | 4 x 0,70              | violett/violet | PA 10358<br>Multipack | 12                                             |
| <b>● HR 50</b><br>                                           | 2-0                                      | 3   | 0,70                  | violett/violet | PA 10281              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                                        | 4   | 0,70                  | violett/violet | PA 10278              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                                        | 3.5 | 0,90                  | violett/violet | PA 10279              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 4                                        | 6   | 0,90                  | violett/violet | PA 10271              | 12                                             |
| <b>● HR 70</b><br>                                          | 3-0                                      | 2   | 0,70                  | violett/violet | PA 10275              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 2-0                                      | 3   | 0,70                  | violett/violet | PA 10257              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 0                                        | 3.5 | 0,70                  | violett/violet | PA 10259              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                                        | 4   | 0,70                  | violett/violet | PA 10260              | 24                                             |
|                                                                                                                                               | 1                                        | 4   | 1,20                  | violett/violet | PA 10268              | 24                                             |
| <b>● HRX 75</b><br>                                         | 2                                        | 5   | 1,20                  | violett/violet | PA 1048               | 24                                             |
| <b>1/2-Kreis Rundkörper stumpf = HRN</b><br>1/2 circle round bodied, blunt point= HRN                                                         |                                          |     |                       |                |                       |                                                |
| <b>○ HRN 50</b><br>                                         | 1                                        | 4   | 0,90                  | violett/violet | PA 1051               | 24                                             |

| Nadel / needle                                                                                                                           | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gerade Rundkörper = GR</b><br><i>straight, round bodied = GR</i>                                                                      |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ● 2 x GR 20                                             | 4-0                                      | 1.5 | 0,35              | violett/violet       | PA 1091               | 24                                             |
| <b>1/2-Kreis schneidende Rundkörper<br/>(Diamond-Spitze) = HRT, HRTX</b><br><i>1/2 circle round bodied,<br/>trocar point = HRT, HRTX</i> |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ▼ HRT 18                                                | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1060               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 1061               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 10615              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 10616              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10621              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 3-0                                      | 2   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10613              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1062               | 24                                             |
|                                                                                                                                          |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ▼ HRT 18 A    Abziehnadel / control release needle    | 2-0                                      | 3   | 6 x 0,45          | violett/violet       | PA 10620<br>Multipack | 12                                             |
| ▼ HRT 22                                              | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 10632              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 10633              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 3-0                                      | 2   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10625              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10629              | 24                                             |
| ▼ HRT 22 A    Abziehnadel / control release needle    | 2-0                                      | 3   | 4 x 0,45          | violett/violet       | PA 1068<br>Multipack  | 12                                             |
| ▼ HRT 25                                              | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 1064               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 1065               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1066               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 1                                        | 4   | 0,90              | violett/violet       | PA 1067               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2                                        | 5   | 0,90              | violett/violet       | PA 1063               | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 3-0                                      | 2   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10622              | 24                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 10628              | 24                                             |
|                                                                                                                                          |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ▼ HRT 25 A    Abziehnadel / control release needle    | 0                                        | 3.5 | 4 x 0,70          | violett/violet       | PA 10614<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                          | 3-0                                      | 2   | 4 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PA 10630<br>Multipack | 12                                             |
|                                                                                                                                          | 2-0                                      | 3   | 4 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PA 10631<br>Multipack | 12                                             |

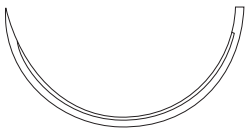
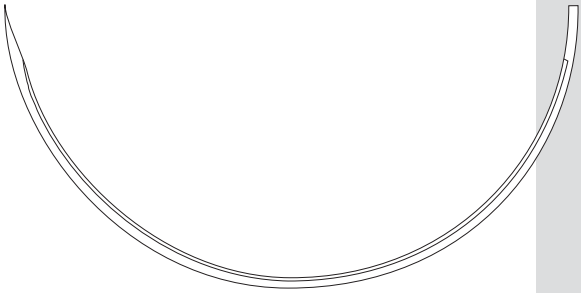
| Nadel / needle                                                                                                                         | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m     | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|  <b>HRT 35</b>                                         | 2-0                                      | 3   | 0,90                  | violett/violet       | PA 10610              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 0                                        | 3.5 | 0,90                  | violett/violet       | PA 10611              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 1                                        | 4   | 0,90                  | violett/violet       | PA 10612              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 2                                        | 5   | 0,90                  | violett/violet       | PA 10624              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 2-0                                      | 3   | 0,90                  | ungefärbt/<br>undyed | PA 10623              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 2-0                                      | 3   | 1,00                  | ungefärbt/<br>undyed | PA 1069               | 24                                             |
|  <b>HRT 35 A</b> Abziehnadel / control release needle  | 1                                        | 4   | 4 x 0,45              | violett/violet       | PA 10619<br>Multipack | 12                                             |
|  <b>HRT 45</b>                                        | 0                                        | 3.5 | 1,50<br>Schlinge/loop | violett/violet       | PA 10626              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 1                                        | 4   | 1,50<br>Schlinge/loop | violett/violet       | PA 10627              | 24                                             |
|  <b>HRTX 50</b>                                      | 1                                        | 4   | 0,90                  | violett/violet       | PA 10617              | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 2                                        | 5   | 0,90                  | violett/violet       | PA 10618              | 24                                             |
| <b>Asymptotische schneidende Rundkörper = ART</b><br>Asymptotic, round bodied, trocar point = ART                                      |                                          |     |                       |                      |                       |                                                |
|  <b>ART 25</b>                                       | 4-0                                      | 1.5 | 0,45                  | violett/violet       | PA 1281               | 12                                             |
| <b>3/8-Kreis Rundkörper = DR, DRF</b><br>3/8 circle, round bodied = DR, DRF                                                            |                                          |     |                       |                      |                       |                                                |
|  <b>DR 10 F</b>                                      | 6-0                                      | 0.7 | 0,45                  | violett/violet       | PA 1071               | 24                                             |
|  <b>DR 12 A</b> Abziehnadel / control release needle | 3-0                                      | 2   | 4 x 0,45              | violett/violet       | PA 1072<br>Multipack  | 12                                             |
| <b>3/8-Kreis schneidende Rundkörper = DRT</b><br>3/8 circle, round bodied, trocar point = DRT                                          |                                          |     |                       |                      |                       |                                                |
|  <b>DRT 12</b>                                       | 6-0                                      | 0.7 | 0,45                  | violett/violet       | PA 1081               | 24                                             |
|                                                                                                                                        | 5-0                                      | 1   | 0,45                  | violett/violet       | PA 1082               | 24                                             |
|  <b>DRT 18</b>                                       | 4-0                                      | 1.5 | 0,45                  | ungefärbt/<br>undyed | PA 1083               | 24                                             |

| Nadel / needle                                                                                                                     | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>3/8-Kreis Rundkörper stumpf = DRN</b><br>3/8 circle, round bodied, blunt point = DRN                                            |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ○ DRN 64<br>                                      | 0                                        | 3.5 | 0,90              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1271               | 24                                             |
| <b>1/2-Kreis schneidende = HS, HSX<br/>mit PREMIUM-Schliff = HSM</b><br>1/2 circle, reverse cutting = HS, HSX<br>PREMIUM cut = HSM |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ▽ HSM 13<br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut     | 5-0                                      | 1   | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1120               | 24                                             |
| ▼ HS 18<br>                                     | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 11112              | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 1113               | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 1114               | 24                                             |
| ▼ HS 22<br>                                     | 3-0                                      | 2   | 0,70              | violett/violet       | PA 1117               | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 1118               | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11118              | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 3-0                                      | 2   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1119               | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 2-0                                      | 3   | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11110              | 24                                             |
|                                                                                                                                    |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ▼ HSX 22<br>                                    | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 11117              | 24                                             |
| ▼ HS 27<br>                                     | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 11111              | 24                                             |
| ▼ HS 35<br>                                     | 2-0                                      | 3   | 0,70              | violett/violet       | PA 1110               | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 0                                        | 3.5 | 0,70              | violett/violet       | PA 1111               | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 1                                        | 4   | 0,70              | violett/violet       | PA 1112               | 24                                             |
| ▼ HS 40<br>                                     | 1                                        | 4   | 0,90              | violett/violet       | PA 11113              | 24                                             |
|                                                                                                                                    | 2                                        | 5   | 0,90              | violett/violet       | PA 11114              | 24                                             |

# PGA RESORBA®

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

| Nadel / needle                                                                                                                  | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| ▼ HS 50<br>                                     | 1                                        | 4   | 0,70              | violett/violet       | PA 11116              | 24                                             |
|                                                                                                                                 | 4                                        | 6   | 0,90              | violett/violet       | PA 11115              | 12                                             |
| ▼ HS 120<br>                                    | 2                                        | 5   | 0,90              | violett/violet       | PA 1115               | 24                                             |
| <b>3/8-Kreis schneidende = DS<br/>mit PREMIUM-Schliff = DSM</b><br>3/8 circle, reverse cutting = DS<br>PREMIUM cut = DSM        |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
| ▽ DSM 11<br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1158               | 24                                             |
| ▼ DS 13<br>                                   | 4-0                                      | 1.5 | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11422              | 24                                             |
| ▽ DSM 13<br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | 5-0                                      | 1   | 0,45              | violett/violet       | PA 1159               | 24                                             |
|                                                                                                                                 | 6-0                                      | 0.7 | 0,70              | violett/violet       | PA 11512              | 24                                             |
|                                                                                                                                 | 5-0                                      | 1   | 0,70              | violett/violet       | PA 11511              | 24                                             |
|                                                                                                                                 | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1150               | 24                                             |
|                                                                                                                                 | 5-0                                      | 1   | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1151               | 24                                             |
|                                                                                                                                 | 4-0                                      | 1.5 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1152               | 24                                             |

| Nadel / needle                                                                                                                              | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>▽ 2 x DSM 13</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut   | 5-0    1                                 | 0,45              | violett/violet       | PA 11515              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 4-0    1.5                               | 0,45              | violett/violet       | PA 11516              | 24                                             |
| <b>▽ 2 x DSM 13 S</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | 5-0    1                                 | 0,45              | violett/violet       | PA 11514              | 24                                             |
|                                                                                                                                             |                                          |                   |                      |                       |                                                |
| <b>▽ DSM 16</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut       | 6-0    0.7                               | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11518              | 24                                             |
|                                                                                                                                             |                                          |                   |                      |                       |                                                |
| <b>▼ DS 18 F</b><br>                                       | 4-0    1.5                               | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11415              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 4-0    1.5                               | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11414              | 24                                             |
| <b>▼ DS 18</b><br>                                       | 5-0    1                                 | 0,45              | violett/violet       | PA 11417              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 4-0    1.5                               | 0,45              | violett/violet       | PA 11418              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 4-0    1.5                               | 0,70              | violett/violet       | PA 11423              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 3-0    2                                 | 0,70              | violett/violet       | PA 11416              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 5-0    1                                 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1140               | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 4-0    1.5                               | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1141               | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 3-0    2                                 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1142               | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 3-0    2                                 | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11413              | 24                                             |
|                                                                                                                                             |                                          |                   |                      |                       |                                                |
|                                                                                                                                             |                                          |                   |                      |                       |                                                |
| <b>▽ DSM 18</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut     | 4-0    1.5                               | 0,70              | violett/violet       | PA 11510              | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 4-0    1.5                               | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1154               | 24                                             |
|                                                                                                                                             | 3-0    2                                 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1155               | 24                                             |
| <b>▽ DSM 18 F</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut   | 4-0    1.5                               | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1153               | 24                                             |

| Nadel / needle                                                                                                                       | Stärke Nr.<br>gauge no. |        | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | USP                     | metric |                   |                      |                       |                                                |
| <b>▼ DS 24</b><br>                                   | 2-0                     | 3      | 0,70              | violett/violet       | PA 11412              | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1143               | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1145               | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1146               | 24                                             |
| <b>▽ DSM 24</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | 3-0                     | 2      | 0,45              | violett/violet       | PA 11513              | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 3-0                     | 2      | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1156               | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 2-0                     | 3      | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1157               | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11517              | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11519              | 24                                             |
| <b>▼ DS 30</b><br>                                 | 0                       | 3.5    | 0,70              | violett/violet       | PA 11411              | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1149               | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 3-0                     | 2      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11421              | 24                                             |
|                                                                                                                                      | 0                       | 3.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1148               | 24                                             |
| <b>▼ DS 40</b><br>                                 | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 11420              | 24                                             |
| <b>1/2-Kreis gebogen außen schneidende = KS</b><br>1/2 curved, reverse cutting = KS                                                  |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| <b>▼ KS 20</b><br>                                | 3-0                     | 2      | 0,45              | violett/violet       | PA 1181               | 24                                             |
| <b>Gerade schneidende = GS</b><br>straight, cutting = GS                                                                             |                         |        |                   |                      |                       |                                                |
| <b>▼ GS 12</b><br>                                 | 4-0                     | 1.5    | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1171               | 24                                             |
| <b>▼ GS 60</b><br>                                 | 2-0                     | 3      | 0,70              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1172               | 24                                             |

| Nadel / needle                                                                                                                                                                                                                  | Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>1/2-Kreis schneidende Spatula,<br/>mit PREMIUM-Schliff = HSPM, HSPM F</b><br><i>1/4 circle, spatulated<br/>PREMIUM cut = HSPM, HSPM F</i>                                                                                    |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
|  <b>2 x HSPM 5</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut       | 10-0                                     | 0.2 | 0,15              | violett/violet       | PA 1191               | 12                                             |
| <b>3/8-Kreis schneidende Spatula,<br/>mit PREMIUM-Schliff = DSPM</b><br><i>3/8 circle, spatulated,<br/>PREMIUM cut = DSPM</i>                                                                                                   |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
|  <b>DSPM 6</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut           | 9-0                                      | 0.3 | 0,30              | violett/violet       | PA 1203               | 12                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 8-0                                      | 0.4 | 0,30              | violett/violet       | PA 1204               | 12                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 7-0                                      | 0.5 | 0,45              | violett/violet       | PA 1205               | 24                                             |
|  <b>2 x DSPM 6</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut    | 9-0                                      | 0.3 | 0,30              | violett/violet       | PA 1206               | 12                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 8-0                                      | 0.4 | 0,45              | violett/violet       | PA 1207               | 12                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 7-0                                      | 0.5 | 0,45              | violett/violet       | PA 1208               | 24                                             |
|  <b>2 x DSPM 7</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut   | 7-0                                      | 0.5 | 0,45              | violett/violet       | PA 1201               | 24                                             |
|  <b>DSPM 9</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut       | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | violett/violet       | PA 1202               | 24                                             |
| <b>1/4-Kreis schneidende Spatula,<br/>mit PREMIUM-Schliff=VSPM, VSPM F</b><br><i>1/4 circle, spatulated,<br/>PREMIUM cut = VSPM, VSPM F</i>                                                                                     |                                          |     |                   |                      |                       |                                                |
|  <b>VSPM 6</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut       | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | violett/violet       | PA 1214               | 24                                             |
|  <b>2 x VSPM 8</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut   | 5-0                                      | 1   | 0,45              | violett/violet       | PA 12112              | 24                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | violett/violet       | PA 12113              | 24                                             |
|  <b>2 x VSPM 8 F</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | violett/violet       | PA 1210               | 24                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 5-0                                      | 1   | 0,45              | violett/violet       | PA 1211               | 24                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 6-0                                      | 0.7 | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1212               | 24                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 5-0                                      | 1   | 0,45              | ungefärbt/<br>undyed | PA 1213               | 24                                             |

# PGA RESORBA®

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen

Sterile pre-cut suture, non-needed

| Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour   | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 6-0                                      | 0.7 | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 133                | 24                                             |
| 5-0                                      | 1   | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 233                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 333                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 433                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 533                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 633                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 733                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 833                | 24                                             |
| 5                                        | 7   | 3 x 0,45          | violett/violet | PS 1033               | 24                                             |
| 5-0                                      | 1   | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 265                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 365                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 465                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 565                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 665                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 765                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 6 x 0,45          | violett/violet | PS 865                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 12 x 0,45         | violett/violet | PS 3125               | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 12 x 0,45         | violett/violet | PS 4125               | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 12 x 0,45         | violett/violet | PS 5125               | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 12 x 0,45         | violett/violet | PS 6125               | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 12 x 0,45         | violett/violet | PS 7125               | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 12 x 0,45         | violett/violet | PS 8125               | 24                                             |
| 5-0                                      | 1   | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 220                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 320                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 420                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 520                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 620                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 720                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 2 x 0,70          | violett/violet | PS 820                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 5 x 0,70          | violett/violet | PS 350                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 5 x 0,70          | violett/violet | PS 450                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 5 x 0,70          | violett/violet | PS 550                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 5 x 0,70          | violett/violet | PS 650                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 5 x 0,70          | violett/violet | PS 750                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 5 x 0,70          | violett/violet | PS 850                | 24                                             |
| 4                                        | 6   | 4 x 0,90          | violett/violet | PS 949                | 24                                             |
| 5                                        | 7   | 4 x 0,90          | violett/violet | PS 1049               | 24                                             |
| 4                                        | 6   | 3 x 1,00          | violett/violet | PS 939                | 12                                             |
| 5                                        | 7   | 3 x 1,00          | violett/violet | PS 1039               | 12                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 315                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 415                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 515                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 615                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 715                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 815                | 24                                             |
| 4                                        | 6   | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 915                | 24                                             |
| 5                                        | 7   | 1 x 1,50          | violett/violet | PS 1015               | 24                                             |

# PGA RESORBA®

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen

Sterile pre-cut suture, non-neededled

| Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour         | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 5-0                                      | 1   | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 233                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 333                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 433                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 533                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 633                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 733                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 3 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 833                | 24                                             |
| 4-0                                      | 1.5 | 6 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 365                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 6 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 465                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 6 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 565                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 6 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 665                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 6 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 765                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 6 x 0,45          | ungefärbt/<br>undyed | PU 865                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 12 x 0,45         | ungefärbt/<br>undyed | PU 4125               | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 12 x 0,45         | ungefärbt/<br>undyed | PU 5125               | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 12 x 0,45         | ungefärbt/<br>undyed | PU 6125               | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 12 x 0,45         | ungefärbt/<br>undyed | PU 7125               | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 12 x 0,45         | ungefärbt/<br>undyed | PU 8125               | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 2 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 520                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 2 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 620                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 2 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 820                | 24                                             |
| 3-0                                      | 2   | 5 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 450                | 24                                             |
| 2-0                                      | 3   | 5 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 550                | 24                                             |
| 0                                        | 3.5 | 5 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 650                | 24                                             |
| 1                                        | 4   | 5 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 750                | 24                                             |
| 2                                        | 5   | 5 x 0,70          | ungefärbt/<br>undyed | PU 850                | 24                                             |

# PGA RESORBA®

**Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen**

*Sterile pre-cut suture, non-needed*

| Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour   | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content<br>in Stück/pieces |
|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 4-0                                      | 1.5 | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 100                | 12                                             |
| 3-0                                      | 2   | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 101                | 12                                             |
| 2-0                                      | 3   | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 102                | 12                                             |
| 0                                        | 3.5 | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 103                | 12                                             |
| 1                                        | 4   | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 104                | 12                                             |
| 2                                        | 5   | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 105                | 12                                             |
| 4                                        | 6   | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 106                | 12                                             |
| 5                                        | 7   | 1 x 2,50          | violett/violet | PL 107                | 12                                             |

## **Sterile PGA-Schlingen, einzeln verpackt**

*Sterile PGA-Loops, single packed*

| Stärke Nr.<br>gauge no.<br>USP    metric |     | Länge/length<br>m | Farbe/colour   | Best.-Nr.<br>code no. | Pckg.-Inhalt<br>box content |
|------------------------------------------|-----|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2-0                                      | 3   | 0,60              | violett/violet | PSV 5                 | 24                          |
| 0                                        | 3.5 | 0,60              | violett/violet | PSV 6                 | 24                          |
| 1                                        | 4   | 0,60              | violett/violet | PSV 7                 | 24                          |
| 2                                        | 5   | 0,60              | violett/violet | PSV 8                 | 24                          |



MedicHome.ru